

Manual de Utilizador Mi Electric Toothbrush



PRECAUÇÕES

⚠ Nota

Poderá sentir comichão ou ter um ligeiro sangramento durante a primeira utilização. Estes efeitos devem-se ao facto de as suas gengivas não estarem acostumadas a esta limpeza eficiente. Recomendamos que utilize o modo favorito ♥ da escova de dentes. Estes sintomas desaparecem, normalmente, no espaço de uma a duas semanas. Se persistirem após duas semanas, deixe de utilizar esta escova de dentes e consulte um dentista.

* Avisos

- Os utilizadores que estejam a ser submetidos a tratamentos de ortodontia, reparações dentárias ou implantes dentários devem utilizar este produto sob a supervisão de dentistas.
- A Mi Electric Toothbrush está em conformidade com as normas de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Caso tenha alguma dúvida sobre pacemakers e outros dispositivos implantados, consulte um médico ou os fabricantes dos dispositivos antes de usar este produto.
- Este produto foi concebido apenas para a limpeza de dentes, gengivas e línguas. Não o utilize para qualquer outra finalidade. Caso sinta qualquer desconforto ou dor, deixe imediatamente de utilizar este produto e consulte um médico.

* Proibições

- Não coloque a base de carregamento dentro de água ou qualquer outro líquido.
- Após a limpeza, certifique-se de que a ficha da base de carregamento está completamente seca e, em seguida, insira-a numa tomada elétrica.
- Este produto contém pilhas recarregáveis integradas. Não queime o produto e não o carregue, utilize ou coloque em ambientes com temperaturas elevadas.
- Não tente modificar, desmontar ou reparar o produto.


* Informações importantes

- Verifique se existem danos óbvios no produto antes de o usar. Não utilize o produto caso esteja danificado ou gravemente partido.
- Antes de ligar a uma tomada elétrica, verifique se a rede elétrica local é compatível com a tensão necessária indicada no produto.
- Não utilize a base de carregamento caso apresente quaisquer danos.
- Deixe de utilizar o produto (incluindo a cabeça e o punho da escova de dentes) caso apresente qualquer sinal de quebra.
- Não utilize a base de carregamento em ambientes com temperaturas elevadas (expostos à luz solar).
- Não utilize a escova de dentes durante o banho ou o duche.

* Conselhos

- Não partilhe a cabeça da escova de dentes com outras pessoas.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta da base de carregamento quando estiver ligado a uma fonte de alimentação.
- Não coloque objetos de metal na base de carregamento quando estiver ligada a uma fonte de alimentação.

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

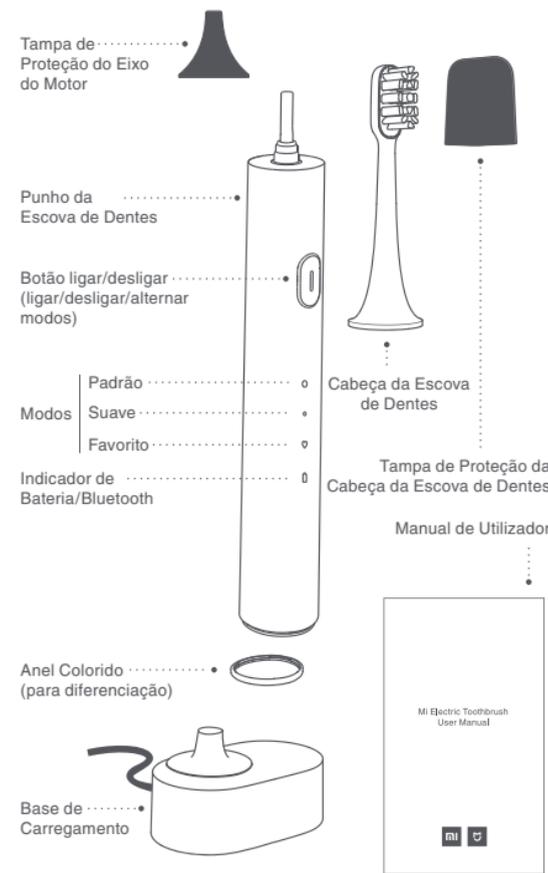


2. COMO UTILIZAR

Conselho:

Poderá sentir comichão ou ter um ligeiro sangramento durante a primeira utilização. Estes efeitos devem-se ao facto de as suas gengivas não estarem acostumadas a esta limpeza eficiente. Recomendamos que utilize o modo favorito ♥ da escova de dentes e que mude para os outros modos após algum tempo para transitar gradualmente da escova de dentes manual para a escova de dentes elétrica. Estes sintomas desaparecem, normalmente, no espaço de uma a duas semanas. Se persistirem após duas semanas, deixe de utilizar esta escova de dentes e consulte um dentista.


a. Instalar a cabeça da escova de dentes

Monte a cabeça da escova de dentes no punho da escova de dentes e certifique-se de que fica um espaço livre entre os dois componentes. (Este espaço tem como objetivo garantir que a cabeça da escova de dentes não colide com o punho da escova de dentes durante a vibração de alta frequência para que o motor possa ser mais poderoso.)

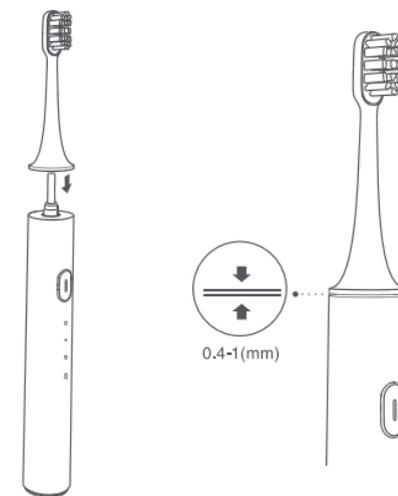

b. Instalar e substituir um anel colorido

- Substitua o anel por um anel de cor diferente conforme preferir.
- Retirar o anel colorido: Agarre na escova de dentes com a mão esquerda, exerça pressão sobre a parte de trás (texturizada) da escova de dentes com o polegar esquerdo, coloque o dedo indicador direito no orifício de ar situado no fundo, insira a unha do polegar no espaço entre o anel colorido e o punho, empurre o anel colorido para cima com alguma força para o remover.
- Instalar um anel colorido: Mantenha o anel colorido com os encaixes virados para baixo e faça coincidir com os três encaixes do punho. Empurre o anel colorido para baixo para o instalar.

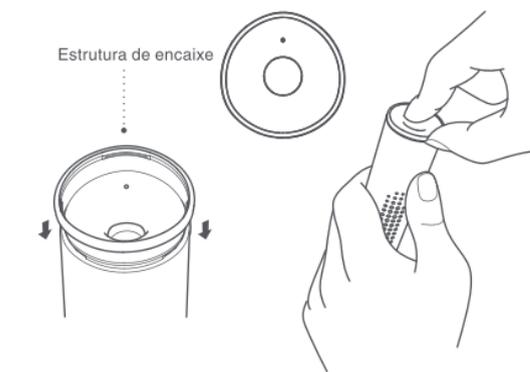

c. Espremer a pasta de dentes

Molhe a cabeça da escova de dentes e esprema a quantidade apropriada de pasta de dentes para a cabeça da escova de dentes.




d. Selecionar um modo



- Ligar/Desligar/Alternar modos.
- Ligar: Prima o botão para ligar a unidade.
- Alternar modos: Quando o dispositivo estiver ligado, prima o botão para trocar de modo.
- Pausa: Prima o botão durante 1 segundo para colocar o dispositivo na pausa. O dispositivo irá desligar automaticamente caso não seja realizada qualquer operação no espaço de 30 segundos após a colocação na pausa.
- Desligar: Quando o dispositivo estiver ligado, passe para o modo favorito ♥ e toque novamente no botão para desligar o dispositivo.
- Em circunstâncias especiais, prima sem soltar o botão durante 12 segundos para repor as predefinições (para evitar erros nos dados, sincronize os dados no smartphone via Bluetooth).

e. Lavar os dentes de forma saudável

- Mova lentamente a escova de dentes, mantendo-a a um ângulo de 45°, entre as cerdas da escova de dentes e a linha das gengivas.
- Pode premir o botão ligar/desligar durante a escovagem para alternar livremente entre os modos de escovagem.
- Durante a escovagem, a escova de dentes irá parar de vibrar durante alguns instantes a cada 30 segundos para lembrar o utilizador de que deve mudar de posição de escovagem.
- Quando a escova de dentes não é colocada na pausa, o dispositivo desliga automaticamente quando o modo de escovagem termina (o modo de escovagem pode ser definido na app).

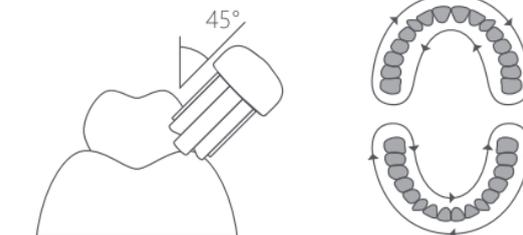


f. Limpar a cabeça da escova de dentes

- Depois de lavar os dentes, enxágue a cabeça da escova de dentes com água corrente.
- Após a limpeza, coloque a tampa de proteção na cabeça da escova de dentes para mantê-la limpa e higiênica.



Testes de segurança alimentar e medicamentosa da FDA

• Os componentes de resinas e copolímeros de acrilonitrilo foram testados em conformidade com o C.F.R. 21, Parte 180.22 e 181.32 da U.S.F.D.A. As resinas de nylon foram testadas em conformidade com o C.F.R. 21, Parte 177.1500 da U.S.F.D.A.

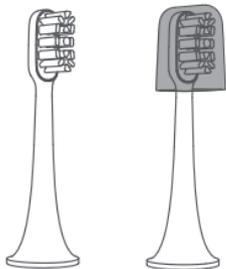


* Recomendamos que a cabeça da escova de dentes seja substituída a cada três meses.

g. Carregar o dispositivo periodicamente

• Quando a base de carregamento é ligada à tomada elétrica, o indicador de bateria da escova de dentes apresenta os efeitos que se seguem:

100%: Luz fixa azul/verde 60-20%: Luz a piscar laranja
100-60%: Luz a piscar azul/verde <20%: Luz a piscar vermelha

- Caso sejam necessárias mais do que 12 horas para carregar totalmente o dispositivo, a bateria estava fraca (o indicador de bateria fica a piscar com a cor vermelha).
- Se a ligação Bluetooth for estabelecida com sucesso durante o carregamento, o indicador de bateria/Bluetooth irá piscar três vezes e a ligação Bluetooth é mantida. Quando a ligação Bluetooth é removida, a indicação de carregamento é retomada.

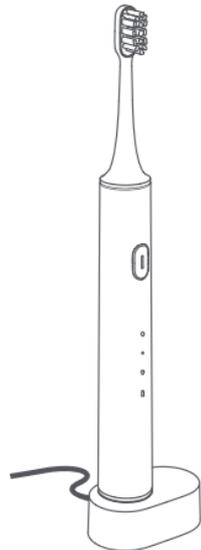

Bluetooth ligado: Azul
100%: Luz fixa azul/verde
100-60%: Luz a piscar azul/verde
60-20%: Luz a piscar laranja
20-0%: Luz a piscar vermelha

DOWNLOAD DA APP MI HOME

a. Configuração Rápida

Controle o seu dispositivo e utilize-o para interagir com outros dispositivos de casa inteligente na app Mi Home.

1. Download e instalação da app Mi Home. Digitalize o código QR ou dirija-se à sua loja de aplicações para realizar o download e a instalação da app Mi Home.



2. Adicionar um dispositivo. Abra a app Mi Home, toque em «+» no canto superior direito e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o seu dispositivo.

b. Ligar à App Mi Home

1. Ative a função Bluetooth no seu smartphone e mantenha a escova de dentes junto ao seu smartphone.
2. Abra a app Mi Home e toque em «+» no canto superior direito para aceder à página de seleção de dispositivos.
3. Procure e selecione «Mi Electric Toothbrush» e entre na página de ligação.
4. Prima sem soltar o botão ligar/desligar durante 3 segundos. O indicador Bluetooth irá piscar três vezes e ficar ligado. O indicador irá desligar quando o dispositivo surgir na página inicial se a ligação for estabelecida com sucesso.

* A escova de dentes não funciona durante a ligação Bluetooth. A ligação Bluetooth não pode ser estabelecida enquanto a escova de dentes estiver a funcionar.

c. Sincronização de Dados

Faça o download da app Mi Home, crie uma conta Mi e inicie sessão nessa conta. Aceda a «My devices» [os meus dispositivos] e toque no dispositivo para o selecionar na lista de dispositivos.



Coloque a escova de dentes junto ao smartphone.



Deslize a página para baixo para sincronizar os dados.



A sincronização de dados está concluída.

d. Visualização de Relatórios e Definições

- Passe para o modo favorito
- Os dados de escovagem e relatórios de análise são exibidos.
- Visualize os dias de vida útil restantes da cabeça da escova de dentes.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

As pilhas de lítio recarregáveis que se encontram no interior do produto podem conter substâncias poluentes. Antes de descartar este produto ou colocar num ponto de recolha disponibilizado pelas autoridades competentes, retire as pilhas e coloque-as num ponto de recolha de pilhas adequado. Caso não consiga remover as pilhas, pode enviar o produto para o centro de serviço pós-venda Mi. O pessoal do centro irá remover as pilhas e proceder à sua eliminação de uma forma amiga do ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Punho da Escova de Dentes

Nome: Mi Electric Toothbrush
Modelo: DDYS01SKS
Tensão nominal: 3,7 V === 0,55 A
Potência nominal: 2 W
Tempo de carregamento: Aprox. 12 h
Classificação IP: IPX7
Bluetooth 4.0:
Intervalo de frequência: 2402-2480 MHz
Potência de saída de RF máx.: 0 dBm
Carregamento sem fios:
Intervalo de frequência: 483,85 kHz
Potência de saída de RF máx.: 0 dBm

Base de Carregamento

Modo de carregamento: Carregamento indutivo
Tipo: Base de carregamento com isolamento seguro
Classificação IP: IPX7
Entrada: 5 V === 0,5 A
Made in China

*Conselhos:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas que não tenham experiência ou conhecimentos prévios, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
2. As crianças têm de ser supervisionadas para impedir que brinquem com o aparelho.
3. As instruções para aparelhos de classe III estabelecem que apenas podem ser alimentados por SELV.
4. As escovas de dentes podem ser usadas por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas que não tenham experiência ou conhecimentos prévios, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

Resolução de Problemas

Problema	Causa
O dispositivo não liga.	O dispositivo está a ser carregado. O dispositivo está ligado via Bluetooth. O nível de carga da bateria é baixo.
A escova de dentes não encaixa no eixo do motor.	O orifício da escova de dentes tem objetos estranhos. Pasta de dentes ou outras substâncias estão coladas no eixo do motor. A escova de dentes não é uma cabeça da escova de dentes Mi autêntica.
O consumo energético é rápido e o dispositivo tem de ser carregado frequentemente.	O dispositivo fica ligado via Bluetooth durante muito tempo. O dispositivo é utilizado frequentemente.
A vibração da cabeça da escova de dentes é fraca.	A cabeça da escova de dentes não está instalada corretamente. Existem objetos estranhos entre a cabeça da escova de dentes e o punho da escova de dentes.
A app não consegue estabelecer ligação com a escova de dentes.	A função Bluetooth do telemóvel não está ligada. A escova de dentes não está suficientemente próxima do telemóvel. A escova de dentes está no modo de vibração.

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para futura referência.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)
Morada: Room 2018, Block B, Floor 2, Ruifeng Business Center, No. 22 Guimiao Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Para obter mais informações, visite www.mi.com.